


OVERALL SIZE: 26.534" WIDE X 1.811" HIGH

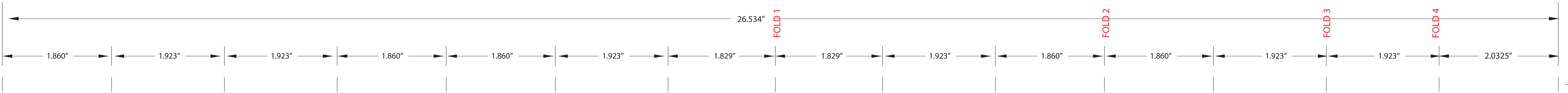

4. Mire hacia la fecha y coloque suavemente el lente de contacto en el blanco de la parte inferior del ojo.
5. Levante lentamente el párpado y cierre el ojo un momento.
6. Parpadee varias veces para centrar el lente de contacto.
7. Use la misma técnica cuando coloque el lente de contacto en el otro ojo.
Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el método anterior no le resulta eficaz, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.


USO DELLENTE DE CONTACTO
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones mientras lleva los lentes de contacto puestos:
Condiciones peligrosas
• Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, manténgalos lejos cuando el spray se haya proyectado.
• Nunca use los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleva puestos los lentes de contacto.
• Nunca enjuague los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua corriente contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Método de plegado:
Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.
Paso 2. Píese suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice.
Paso 3. Retire el lente de contacto.
2. Sigue las instrucciones de la siguiente sección, "Cuidado de los lentes de contacto".
NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se pueda mover por el ojo. Si el lente de contacto se pega (está de nervones) en su ojo, retire suavemente un pedruzco de solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente de contacto comience a moverse libremente en el ojo antes de retirarlo.

3. Para desvincular los lentes de contacto adecuadamente, frota y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuague recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche humectante.
5. Limpie siempre primer el mismo lente de contacto, para evitar contaminaciones.
6. Nunca use las soluciones proporcionadas en el etiquetado del producto sobre lentes de contacto que ya no se recomiendan por su profesional de la visión.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA
La corrección visual a través de monovisión debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.
Consulte con su optometrista para obtener más información y asesoramiento sobre el uso de lentes de contacto.
Condiciones de garantía: Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

Table with 2 columns: Símbolo and Descripción. It lists various symbols used in the instruction booklet, such as 'Indica un sistema único de barras estéri', 'Filtro ultravioleta', and 'Representante Autorizado en la Comunidad Europea'.

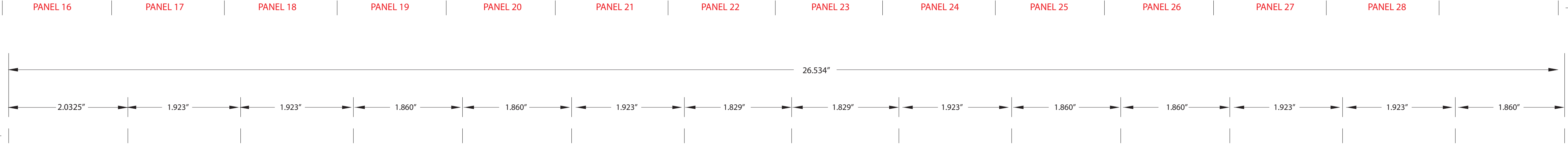

Johnson & Johnson de Chile S.A. Centro Comercial Plaza 9, Torre 1, Las Condes, Santiago, Chile.
República Dominicana: P.O. Box 5057, 3117, Santo Domingo.
Nicaragua: Managua, Nicaragua. Distribuidor: Óptica Visión de Nicaragua S.A.
Argentina: Calle Uruguay 198, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Table with 4 columns: Nombre de la marca, Material, Solución de Enjuague, Forma de Uso. It lists the product name AQUUEB 2, material etafilcon A, and provides instructions on how to use the solution and the lens.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO INDICADO
Este producto está diseñado para la corrección de la visión en personas con ojos sanos que tienen dificultad para ver los objetos cercanos.
2. CONTRADIACCIONES (¿Quién no se debe usarlo?)
No se recomienda el uso de este producto en personas con condiciones de salud que afectan la visión o la salud de los ojos.
3. PRECAUCIONES
• Evite el contacto con los ojos.
• No use el producto si tiene síntomas de una infección ocular.

6. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo manejarlos:
• Irritación ocular: Si experimenta irritación, retire el lente de contacto y consulte a su profesional de la visión.
• Entorpecimiento ocular: Si experimenta entorpecimiento, retire el lente de contacto y consulte a su profesional de la visión.
• Entorpecimiento ocular: Si experimenta entorpecimiento, retire el lente de contacto y consulte a su profesional de la visión.

Si usted nota algún problema, debe REMOVERSE SULENTE DE CONTACTO DE INMEDIATO. Si el problema o la molestia persisten, consulte a su profesional de la visión.
1. Agua de empuñadura de los lentes de contacto y compruebe que el lente de contacto esté frotado en la solución.
2. Retire la solución con cuidado para evitar dañar el lente de contacto.
3. Pásele suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice. Los bordes deben inclinarse hacia dentro. Si el lente de contacto está del revés, los bordes se inclinarán ligeramente hacia fuera.

que esté libre de mallas o desgarros. Si el lente de contacto parece dañado, NO lo use.
Paso 2. Colocación del lente de contacto en el ojo
Rótalo, empujelo suavemente con el dedo índice y examine su posición. El lente de contacto debe adaptarse a la forma natural, curvada, similar a la de un casco. Si los bordes del lente de contacto tienden a apartarse hacia fuera, la estrabismicidad del lente de contacto.

