



IFU000796E
02/2025

Instructions for Use Daily Wear and Extended Wear ACUVUE Contact Lenses

Graphics

TR [Günlük Kullan-At ACUVUE Kontakt Lenslere İlişkin Kullanım Kılavuzu](#) **3**

EN [Instructions for Use Daily Disposable ACUVUE Contact Lenses](#) **5**

Fig. 1



Fig. 2


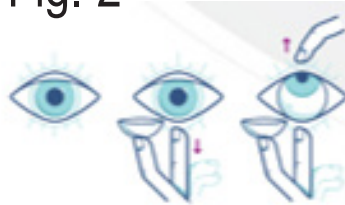


Fig. 3



Fig. 4

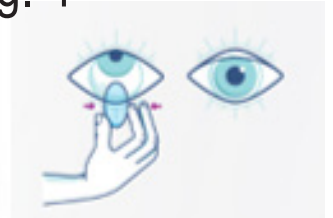

ACUVUE®



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway,
Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care
Ireland UC, The National Technology Park,
Limerick, Ireland



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office
Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

CE

2797

LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. ACUVUE KONTAKT LENSLE (KL) TIBBİ CİHAZDIR VE UYGUN KULLANIM HER ZAMAN BİR GÖZ HASTALIKLARI UZMANI (GHU) TARAFINDAN BELİRLENMELİDİR. GHU'NUZUN YÖNLENDİRMELERİNİ VE BU KILAVUZDA SAĞLANAN TALİMATLARI HER ZAMAN TAKİP EDİN.

11. ÜRÜ AÇIKLAMASI VE KULLANIM AMACI:

Listelenen tüm ürünler ülkenizde mevcut olmayabilir.

ACUVUE OASYS Marka HydraLuxe içeren Kontakt Lensler; ASTİGMATİZMA için ACUVUE OASYS Marka HydraLuxe içeren Kontakt Lensler; ACUVUE OASYS MAX 1-Day Kontakt Lensler, ASTİGMATİZMA için ACUVUE OASYS MAX 1-Day Kontakt Lensler; ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTİFOKAL Kontakt Lensler; ASTİGMATİZMA için ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTİFOKAL Kontakt Lensler.

Ambalaj Solüsyonu: Metil eter selüloz içeren boratla tamponlanmış salin

Materyal: senofilcon A

1-DAY ACUVUE MOIST Marka Kontakt Lensler; ASTİGMATİZMA için 1-DAY ACUVUE MOIST Marka Kontakt Lensler; 1-DAY ACUVUE MOIST Marka MULTİFOKAL Kontakt Lensler

Ambalaj Solüsyonu: Povidon içeren boratla tamponlanmış salin.

Materyal: etafilcon A

Boratlar (borik asit ve sodyum borat), ağırlıkça %0,1 üzerindeki bir konsantrasyonda CMR 1B maddeler olarak tanımlanır ve ürün, etiketteki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında güvenlidir. Uyanıkken 24 saatten kısa süreli olarak takılması için tasarlanmış Günlük Kullan-At ACUVUE kontakt lensler. Göz Hastalıkları Uzmanınız lensleri reçete etmeli ve kullanım programınızı belirlemelidir. Lenslerinizin temizlenmesine veya dezenfekte edilmesine gerek yoktur; lensler çıkarıldıktan sonra atılmalıdır.

- Günlük Kullan-At ACUVUE Sferik Kontakt Lensler gözleri sağlıklı olan ve $\leq 1.00D$ astigmatizması olan kişilerde miyopi (uzaqı görme) ve hipermetropinin (yakını görme) optik olarak düzeltilmesine yönelik Günlük Kullanım içindir.
- ASTİGMATİZMA için Günlük Kullan-At ACUVUE Kontakt Lensler, gözleri sağlıklı olan ve astigmatizması bulunan kişilerde miyopi (uzaqı görme) ve hipermetropinin (yakını görme) optik olarak düzeltilmesine yönelik Günlük Kullanım içindir.
- Günlük Tek Kullanımlık ACUVUE Kontakt Lensleri, presbyopik kişilerde sağlıklı gözler için Miyopi (Uzaqı görme) ve Hipermetropi (Yakını görme) optik düzeltmesi amacıyla günlük kullanım için tasarlanmıştır ve 0.75D veya daha az astigmatizması olan kişiler için geçerlidir.
- Günlük Tek Kullanımlık ACUVUE Kontakt Lensleri, PRESBYOPIA ve ASTİGMATİZM için, presbyopik kişilerde sağlıklı gözler için Miyopi (Uzaqı görme) ve Hipermetropi (Yakını görme) optik düzeltmesi amacıyla günlük kullanım için tasarlanmıştır ve 0.75D den 1.75D ye kadar astigmatizması olan kişiler için geçerlidir.

UYARI: UV blokajlı KL, UV korumasının yerine geçmez. Önerilen şekilde UV blokajlı gözlükleri kullanmaya devam etmeniz gerekir.

KONTRENDİKASYONLAR:

Görme düzeltilmesi için KL kullanırken, göz hastalığı, yaralanma, iltihaplanma, enfeksiyon veya anormallik durumunda KL KULLANMAYIN.

- KL kullanımının veya KL solüsyonlarının kullanımının neden olduğu veya ağırlaştırdığı göz veya çevre dokulardaki herhangi bir durum veya hastalık
- Gözlerin kızarması veya tahriş olması. Bazı kişiler kontakt lens bakım solüsyonlarındaki kimyasallara veya koruyuculara karşı alerjik bir tepki geliştirebilir.

UYARILAR:

Bu uyarılara uyulmaması ciddi enfeksiyon, görme kaybı veya körlüğe yol açabilir. ÇEŞİTLİ GÖZ SORUNLARI (KORNEA ÜLSERLERİ DAHİL) HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİŞEBİLİR VE GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR. AŞAĞIDAKİ SEMPTOMLARDAN (Gözde Rahatsızlık, Görme Kaybı, Görmeye Değişiklikler, Aşırı Sulanma, Gözde Kızarıklık), HERHANGİ BİRİNİ YAŞARSANIZ, DERHAL KL'NİZİ ÇIKARMALI VE GHU'NUZ İLE İLETİŞİME GEÇMELİSİNİZ.

- Herhangi bir göz hastalığı varsa KL takmayın
- UYURKEN KL'NİZİ ÇIKARIN
- KL'Yİ SUYA MARUZ BIRAKMAYIN, BU CİDDİ ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR. Suyu maruz kalan KL'yi atın ve değiştirin (Su sporu sırasında KL takmayın).
- Lenslerinizi ASLA musluk suyuyla yıkamayın.

ÖNEMLER:

STERİL BLİSTER AMBALAJ AÇILMIŞ, HASAR GÖRMÜŞ YA DA SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞSE LENSİ KULLANMAYIN.

• Sadece size reçete edilmiş KL'nizi takın. GHU'nuzla danışmadan lensinizin çeşidini veya parametrelerini değiştirmeyin. Takip ziyareti programı hakkında GHU'nuzdan bilgi alın.

• GÖZÜNÜZDE HERHANGİ BİR İLAÇ KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA GHU İLE İLETİŞİME GEÇİN.

• Lenslerinizi lens kabından çıkarmak için ASLA cımbız veya başka bir alet kullanmayın.

- Sigara içmek ve/veya bazı ilaçları (doğum kontrol hapları veya diğer ilaçlar gibi) almak göz sorunlarını veya göz rahatsızlığını artırabilir.
- Zararlı veya tahriş edici buhar/dumana maruz kalmaktan kaçının. Aerosol ürünlerin kullanımı sırasında gözlerinizi kapalı tutun.

ADVERS OLAYLAR:

Yanma, batma, kaşınma ve/veya gözlerde kuruluk

- Lensin konforunda azalma veya gözünüzde bir şey varmış hissi - Gözlerin içinde veya etrafında şişme veya enflamasyon - Gözde kızarıklık - Göz kapağı sorunları - Gözlerde sulanma ve/veya olağan dışı göz salgıları - Görüş keskinliğinde bozulma veya bulanık görme - Neşnelerin etrafında ışık halkası (halolar) veya gökkuşağı benzeri görüntüler görme - Işığa duyarlılık - periferik infiltratlar, periferik kornea ülserleri ve korneal erozyon nedeniyle bazı geçici bozukluklar. Herhangi bir sorun fark ederseniz, HEMEN KL'nizi ÇIKARMALI ve GHU'nuz ile iletişime geçmelisiniz.

KULLANIM TALİMATLARI:

Kullanım talimatlarına uyulmaması ciddi göz sorunlarına yol açabilir.

- KL kirlenmeye karşı çok hassas olduğu için KL'NİZE DOKUNMADAN ÖNCE DAİMA ELLERİNİZİ YIKAYIN.
- LENSLEİNİZİ ASLA AĞZINIZA KOYMAYIN VEYA LENSLEİNİZİN ÜZERİNE TUKURUK SURMEYİN.
- ASLA LENSLEİNİZİ BAŞKASININ TAKMASINA İZİN VERMEYİN.
- KL'nizin takılması ve çıkarılmasıyla ilgili GHU'nuzun talimatlarına uyun.

Lens Ambalajı: Lensi çıkarmak için folyo kılıfı dikkatli bir şekilde geniyeye doğru soyun.

Lens Takma: Lensin ters yüz olmadığından emin olun. Şeklini kontrol etmek için işaret parmağınızın üzerine yerleştirin. Lensin doğal, eğimli ve çanak şeklinde olması gerekir (Şekil 1). Lens işaret parmağınızdayken göz kırpmamanız için diğer elinizle üst göz kapağınızı tutun. Lensi gözünüze yerleştirin. (Şekil 2 ve 3).

Lens Çıkarma: Yukarı bakın, işaret parmağınızı kullanarak lensi gözün alt kısmına kaydırın. Çıkarmak için lensi baş ve işaret parmaklarınızın arasında hafifçe çimdikleyin. (Şekil 4)

ACİL DURUMLAR: Gözünüze herhangi tür bir kimyasal (ev tipi ürünler, bahçe işi solüsyonları, laboratuvar kimyasalları vb.) sıçarsa: GÖZLERİNİZİ HEMEN MUSLUK SUYUYLA YIKAYIN VE DERHAL GHU'NUZLA İLETİŞİME GEÇİN VEYA BİR HASTANE ACİL SERVİSİNE GİDİN.

ADVERS OLAYLARIN BİLDİRİLMESİ (Yan Etkiler): ACUVUE Marka KL kullanırken karşılaştığınız tüm olaylar, üreticiye ve/veya yetkili temsilcisine ve/veya bulduğunuz ülkedeki ulusal yetkili makama bildirilmelidir.

Göz Hastalıkları Uzmanlarıyla ilgili ek bilgileri www.e-ifu.com adresinde bulabilirsiniz. Düzenleme Tarihi: 02/2025

Tüketici Haklarına İlişkin Bilgilendirme:

Satın almış olduğunuz kontakt lenslerin ayıplı olması halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesi çerçevesinde tarafınıza tanınmış olan seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu kapsamda birini kullanabileceğiniz seçimlik haklarınız şu şekildedir:

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, (c) ve (ç) maddelerinde belirtilen hakları, üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilirsiniz.

Seçimlik haklarınıza ilişkin diğer detaylar için lütfen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11.Maddesi'ne bakınız. Şikayet ve itirazlarınızı konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem heyetine yapabilirsiniz.

Aşağıdaki semboller etiket veya ambalajlarda bulunabilir:

Sembol	Açıklama
	Üretim Tarihi
	Üretici
	Kullanım Süresi (son kullanma tarihi)
	Parti Kodu
	Ambalaj Hasarlı ise Kullanmayın
	Kullanım kılavuzuna bakın
	Dikkat
	Buhar Isısı Kullanılarak Sterilize Edilmiştir
	Tekrar Kullanmayın (Tek kullanımlık)
	Avrupa Birliği içinde kullanılan Tıbbi Cihaz
	Tek Bir Steril Bariyer Sistemini Gösterir
	DİKKAT: ABD Federal Yasaları bu cihazın satışını yetkili bir doktor tarafından veya yetkili bir doktorun izniyle yapılacak şekilde sınırlamıştır
	UV Blokajı
	Avrupa Birliği içinde Yetkili Temsilci
	CE İşareti ve Onaylı Kuruluşun Tanımlama Numarası
	Çap
	Temel Eğri
	Diyoptri (lens gücü)
	Tehlikeli Maddeler İçerir
	İthalatçı

PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. ACUVUE CONTACT LENSES (CL) ARE MEDICAL DEVICES AND SHOULD BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL (ECP). ALWAYS FOLLOW YOUR ECP'S DIRECTIONS AND THE INSTRUCTIONS IN THIS LEAFLET.

PRODUCT DESCRIPTION and INTENDED USE: Not all of the listed products might be available in your country.

ACUVUE OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe; ACUVUE OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe; ACUVUE OASYS MAX 1-Day Contact Lenses, ACUVUE OASYS MAX 1-Day Contact Lenses for ASTIGMATISM; ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses; ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL Contact Lenses for ASTIGMATISM

Packing Solution: Borate buffered saline with methyl ether cellulose.

Material: senofilcon A

1-DAY ACUVUE MOIST Brand Contact Lenses;

1-DAY ACUVUE MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM; 1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL Brand Contact Lenses.

Packing Solution: Borate buffered saline with povidone.

Material: etafilcon A.

Borates (boric acid & sodium borate) are defined as CMR 1B substances in a concentration above 0.1% weight by weight and are safe when the product is used according to label instructions. Daily Disposable ACUVUE contact lenses that are intended to be worn for < 24 hours while awake. Your Eye Care Professional should prescribe the lenses and determine your wearing schedule. Your lenses do not require cleaning or disinfection and should be discarded upon removal.

•Daily Disposable ACUVUE Spherical Contact Lenses are intended for Daily Wear for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes that may have $\leq 1.00D$ of astigmatism.

•Daily Disposable ACUVUE Contact Lenses for ASTIGMATISM are intended for Daily Wear and for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes that have astigmatism.

•Daily Disposable ACUVUE Contact Lenses for PRESBYOPIA are intended for Daily Wear for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in presbyopic persons with healthy eyes who have 0.75D or less of astigmatism.

•Daily Disposable ACUVUE Contact Lenses for PRESBYOPIA and ASTIGMATISM are intended for Daily Wear for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in presbyopic persons with healthy eyes who have 0.75D to 1.75D of astigmatism.

WARNING: UV absorbing CL are not substitutes for UV protection. You should continue to use UV absorbing eyewear as directed.

CONTRAINDICATIONS:

When wearing CL for vision correction, DO NOT USE CL in case of eye disease, injury, inflammation, infection, or abnormality.

•Any condition or disease of the eye or surrounding tissues induced or aggravated by wearing CL or use of CL solutions.
•If eyes become red or irritated. Some people may develop an allergic response to chemicals or preservatives in contact lens care solutions.

WARNINGS:

•Failure to adhere to these warnings can lead to severe infection, vision loss or blindness. EYE PROBLEMS (INCLUDING CORNEAL ULCERS) CAN DEVELOP RAPIDLY AND LEAD TO LOSS OF VISION. IF YOU EXPERIENCE ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS (Eye Discomfort, Loss of Vision, Vision Changes, Excessive Tearing, Eye Redness), you should IMMEDIATELY REMOVE YOUR CL AND PROMPTLY CONTACT YOUR ECP.

- Do not wear CL if there is any eye disease.
- DO NOT WEAR YOUR CL WHEN SLEEPING
- DO NOT EXPOSE CL TO WATER, AS THIS MAY LEAD TO SERIOUS INFECTION. Discard and replace any CL exposed to water. (Do not wear CL during water sport).
- NEVER rinse your lenses in water from the tap

PRECAUTIONS:

DO NOT USE YOUR LENSES IF THE STERILE BLISTER PACKAGE IS OPENED, DAMAGED OR AFTER THE EXPIRY DATE.

• Only wear your own prescribed CL. Do not change your lens type or parameters without consulting your ECP. Ask your ECP about the follow-up visit schedule.

•ALWAYS CONTACT ECP BEFORE USING ANY MEDICINE IN YOUR EYES.

•NEVER use tweezers or other tools to remove your lenses from the lens container.

•Smoking and/or taking some medicines (like contraceptives or other medicines) may increase eye problems or eye discomfort.

•AVOID all harmful or irritating vapors/fumes. Keep your eyes closed during usage of aerosol products.

ADVERSE REACTIONS:

- Burning, stinging, itchy, and/or dry eyes
- Reduced lens comfort or feeling of something in your eye
- Swelling or inflammation in or around the eyes
- Eye redness
- Eyelid problems
- Watery eyes and/or unusual eye secretions
- Poor or blurred vision
- Rainbows or halos around objects
- Sensitivity to light
- Temporary impairment due to peripheral infiltrates, peripheral corneal ulcers, and corneal erosion.

If you notice any problems, you should IMMEDIATELY REMOVE YOUR CL and contact your ECP.

DIRECTIONS FOR USE:

Not following directions for use may result in severe eye problems.

•ALWAYS WASH YOUR HANDS BEFORE TOUCHING YOUR CL as CL are very sensitive to contamination.

•NEVER PUT YOUR LENSES IN YOUR MOUTH OR PUT SALIVA ON YOUR LENSES.

•NEVER ALLOW ANYONE ELSE TO WEAR YOUR LENSES.

•Follow your ECP instructions regarding wear and removal of your CL.

Lens Package: Carefully peel back the foil closure to reveal the lens.

Lens Insertion: Ensure the lens is not inside out. Place on your index finger to verify the shape. The lens should assume a natural, curved, bowl-like shape (Fig. 1). With the lens on your index finger, use your other hand to hold your upper eyelid so you will not blink. Place the lens onto the eye. (Fig 2 & 3).


Lens Removal: Look up, slide the lens to the lower part of the eye using the forefinger. Gently pinch the lens between the thumb and forefinger to remove the lens. (Fig. 4)

EMERGENCIES: If chemicals of any kind (household products, gardening solutions, laboratory chemicals, etc.) are splashed into your eyes: FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH TAP WATER AND IMMEDIATELY CONTACT YOUR ECP OR VISIT A HOSPITAL EMERGENCY ROOM RIGHT AWAY.

REPORTING OF ADVERSE REACTIONS (Side Effects):

Any incident experienced whilst wearing ACUVUE Brand CL should be reported to the manufacturer and/or its authorized representative and/or to your national authority.

The following symbols may appear on the labels or packaging

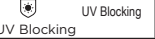Symbol	Definition
	Date of Manufacture
	Manufacture
	Use-by Date (expiration date)
	Batch Code
	Do Not Use if Package is Damaged
	Consult Instructions for Use or Consult Electronic Instructions for use
	Caution
	Sterilized Using Steam Heat
	Do Not Re-Use (Single Use)
	Medical Device in the European Community
	Indicates a Single Sterile Barrier System
	CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner
	UV Blocking
	UV Blocking
	Authorized Representative in the European Community
	CE-mark and Identification Number of Notified Body
	Diameter
	Base Curve
	Diopter (lens power)
	Contains Hazardous Substances
	Importer