

ACUVUE®


TWÓJ SZYBKI I PROSTY PRZEWODNIK DOPASOWANIA



Zdjęcia produktu tylko w celach ilustracyjnych.



Wyjątkowa konstrukcja:
ZOPTYMALIZOWANA
STREFA OPTYCZNA¹

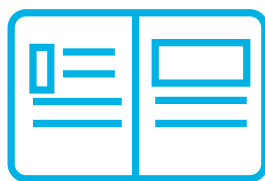

Przewodnik dopasowania
ACUVUE® MULTIFOCAL



Zadowalające dopasowania
i satysfakcja pacjentów

**OPRACOWANE TAK, ABY
OFEROWAĆ WYJĄTKOWE
WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE*¹.**

Dostępne zarówno w trybie jednodniowym
jak i planowej wymiany.

ACUVUE®
MULTIFOCAL
WITH PUPIL OPTIMISED DESIGN



Marka oferująca dopasowanie 100% parametrów **do wieku i wady refrakcji**1**

ZOPTYMALIZOWANA STREFA OPTYCZNA

Osoba
krótkowzroczna

Osoba
emmetropijna

Osoba
nadwzroczna

WIELKOŚĆ ŻRENICY
różni się w zależności
od wieku i wady
refrakcji



KONSTRUKCJA
OPTYCZNA ACUVUE®
MULTIFOCAL



Zoptymalizowana konstrukcja optyczna, uwzględniająca naturalną zmienność wielkości źrenic w zależności od wieku i wady refrakcji¹.

TRADYCYJNA
KONSTRUKCJA
SOCZEWKI
MULTIFOKALNEJ



Stała konstrukcja optyczna nie uwzględnia zmian wielkości źrenic w wyniku wady refrakcji¹.

Ilustracja ma wyłącznie charakter poglądowy.

WBUDOWANA PRECYZJA



Soczewki ACUVUE® MULTIFOCAL ze ZOPTYMALIZOWANĄ STREFĄ OPTYCZNĄ umożliwiają BARDZIEJ PRECYZYJNE DOPASOWANIE: technologia hybrydowej krzywizny tylnej umożliwia **lepsze dopasowanie do naturalnego kształtu powierzchni oka** pomagając utrzymać konstrukcję optyczną soczewki we **właściwym miejscu**¹.



Każdy parametr jest zaprojektowany tak, aby pasował do różnych rozmiarów źrenic i zapewniał najlepszą równowagę widzenia dla danego wieku i wady refrakcji¹.



Wybór soczewek próbnych

1

Określ najlepszą ostrość wzroku z korekcją sferyczną (BVS)

Należy wykonać od nowa subiektywne badanie refrakcji^o, a następnie zdjąć korekcję cylindryczną i określić ostrość wzroku w dali z jak najmniejszą sferyczną mocą minusową^{oo}

2

Określ dominację sensoryczną oka

Test nieostrości z soczewką +1,00 D/+1,50 D jest zalecaną metodą, zamiast metod motorycznych

3

Określ minimalną moc addycji (ADD) w oparciu o potrzeby pacjenta

Po ustaleniu najlepszej ostrości wzroku z korekcją sferyczną do dali (BVS), należy określić najniższą moc addycji umożliwiającą dobre widzenie w bliży.

Wskazówka: Zaczynj od 0,50D mniejszej addycji niż okularowa i w razie potrzeby zwiększaj w krokach co 0,25D, aż do osiągnięcia wymaganego widzenia bliży.

4

Wybierz soczewki bazując na tabelach poniżej

Addycja	Wybór pierwszej soczewki próbnej		Poprawa widzenia do dali		Poprawa widzenia do bliży	
	Oko dominujące	Oko niedominujące	Oko dominujące	Oko niedominujące	Oko dominujące	Oko niedominujące
+0,75 do +1,25			Soczewka jednoogniskowa ACUVUE®			 dodaj +0,25D do mocy korekcji do dali
+1,50 do +1,75						 dodaj +0,25D do mocy korekcji do dali
+2,00 do +2,50				 dodaj +0,25D do mocy korekcji do dali		 dodaj +0,25D do mocy korekcji do dali



Wizyta kontrolna

Jeśli osoba nosząca już soczewki kontaktowe ACUVUE® Multifocal powróci na wizytę kontrolną, zgłaszając zmiany w widzeniu do dali lub bliży:



Nie wykonuj nadrefrakcji bieżącej korekcji



Nie używaj wskazówek z tabeli w celu poprawy widzenia do dali lub bliży



Nie dostosowuj ADD



Zdejmij soczewki i wykonaj dopasowanie na nowo w krokach 1 - 4.



Zapewnij większy sukces swoim pacjentom i gabinetowi, stosując się do przewodnika dopasowania soczewek multifokalnych

Soczewki marki ACUVUE® MULTIFOCAL ze ZOPTYMALIZOWANĄ STREFĄ OPTYCZNĄ



Oferują bardziej **spersonalizowaną korekcję** Twoim pacjentom^{**1}.



Zapewniają **wysoki wskaźnik udanych dopasowań** w dużej grupie pacjentów prezbiopijnych, niezależnie od ich wieku i wady refrakcji¹.

CHARAKTERYSTYKA SOCZEWEK	1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL	ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 2-tygodniowe	ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY MULTIFOCAL
Materiał	etafilcon A	senofilcon A	senofilcon A
Średnica	14,3 mm	14,3 mm	14,3 mm
Krzywizna bazowa	8,4 mm	8,4 mm	8,4 mm
Technologia	PVP+ wbudowany w strukturę soczewki Technologia LACREON®	PVP+ wbudowany w strukturę soczewki / Technologia HYDRACLEAR® PLUS	PVP+ wbudowany w strukturę soczewki Technologia TearStable™ Technologia OptiBlue™ [^]
Filtr UV [‡]	Klasa 2	Klasa 1	Klasa 1
Dk/t [§]	25,5 x 10 ⁻⁹ s	147 x 10 ⁻⁹ s	147 x 10 ⁻⁹ s
Widoczne zabarwienie	Tak	Tak	Tak
Moc sferyczna	-9,00 D do +6,00 D (zmiana co 0,25 D)	-9,00 D do +6,00 D (zmiana co 0,25 D)	-9,00 D do +6,00 D (zmiana co 0,25 D)
Addycja	LOW +0,75 D do +1,25 D MID +1,50 D do +1,75 D HIGH +2,00 D do +2,50 D	LOW +0,75 D do +1,25 D MID +1,50 D do +1,75 D HIGH +2,00 D do +2,50 D	LOW +0,75 D do +1,25 D MID +1,50 D do +1,75 D HIGH +2,00 D do +2,50 D

[§]Dk/t jednostki: 10 (cm/s) (ml O / ml x mm Hg). Wszystkie poziomy Dk: Jednostki Fatt w temperaturze 35°C wyznaczone metodą polarograficzną (z uwzględnieniem efektu brzegowego i granicznego) (soczewka -3,00 D).

[^]PVP=poliwinyliopirolidon



Skorzystaj z kalkulatora dopasowania soczewek multifokalnych ACUVUE®, który przyspiesza i ułatwia dopasowanie oraz pomaga wybrać odpowiednie soczewki – <https://www.jnjvisioncare.pl/5minfit>

¹Wszystkie soczewki marki ACUVUE® posiadają filtr UV klasy 1 lub 2, który pomaga zapewnić ochronę przed przenikaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego do rogówki i położonych głębiej struktur oka. Soczewki kontaktowe wyposażone w filtr UV NIE MOGĄ zastąpić pełnej ochrony oczu takiej jak okulary przeciwsłoneczne zatrzymujące promieniowanie ultrafioletowe, ponieważ soczewka nie osłania całej powierzchni oka ani sąsiednich obszarów. ^{**}W porównaniu z wcześniejszą konstrukcją multifokalną JJV; technologia jest optymalnie dostosowana do parametrów wady refrakcji i mocy addycji oraz różnych odległości wzrokowych i warunków oświetlenia. ^{***}W porównaniu z konstrukcjami konkurencyjnymi, technologia jest optymalnie dostosowana do wady refrakcji i mocy addycji. [^] Nie udowodniono, że filtrowanie światła niebiesko-fioletowego (HEV) przez soczewki kontaktowe pozwala użytkownikowi uzyskać korzyści w zakresie zdrowia oczu lub ogólnego stanu zdrowia. Szczegółowych informacji udzieli specjalista w zakresie zdrowia oczu. 1. Dane firmy JJV 2022. TECHNOLOGIA ACUVUE® PUPIL OPTIMIZED DESIGN: Soczewki kontaktowe JJVC, ich cechy projektowe i związane z nimi korzyści.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania: Soczewki kontaktowe ACUVUE® są wskazane do korekcji wzroku. Podobnie jak w przypadku każdej soczewki kontaktowej mogą wystąpić problemy z oczami, w tym owrzodzenia rogówki. Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać lekkie podrażnienia, swędzenie lub dyskomfort. Soczewek kontaktowych nie należy używać podczas infekcji czy innych chorób oczu ani w przypadku choroby ogólnoustrojowej, która może wpływać na oko. Aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie, w tym przeciwwskazania, środki ostrożności i działania niepożądane, należy zapoznać się z instrukcją używania lub odwiedzić stronę internetową Johnson & Johnson www.e-IJU.com. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: <https://www.jnjvisioncare.pl/important-safety-information>. Znaki towarowe prezentowanych produktów z portfolio ACUVUE® należą do Johnson & Johnson. Materiał przeznaczony dla profesjonalistów. 2024PP05254