

SNEL EN EENVOUDIG SUCCESVOL AANPASSEN



Productafbeeldingen zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden



**Uniek
PUPIL OPTIMISED DESIGN¹**



**ACUVUE® MULTIFOCAL
Aanpashandleiding**



**Aanpassucces &
klanttevredenheid**


Ontworpen voor uitzonderlijke visuele prestaties.*¹
Nu beschikbaar in daglenzen en 2-wekelijks lenzen.

**ACUVUE®
MULTIFOCAL**
WITH PUPIL OPTIMISED DESIGN



Het enige merk waarbij 100% van de parameters zijn geoptimaliseerd voor leeftijd en refractieafwijking**¹

PUPIL OPTIMISED DESIGN

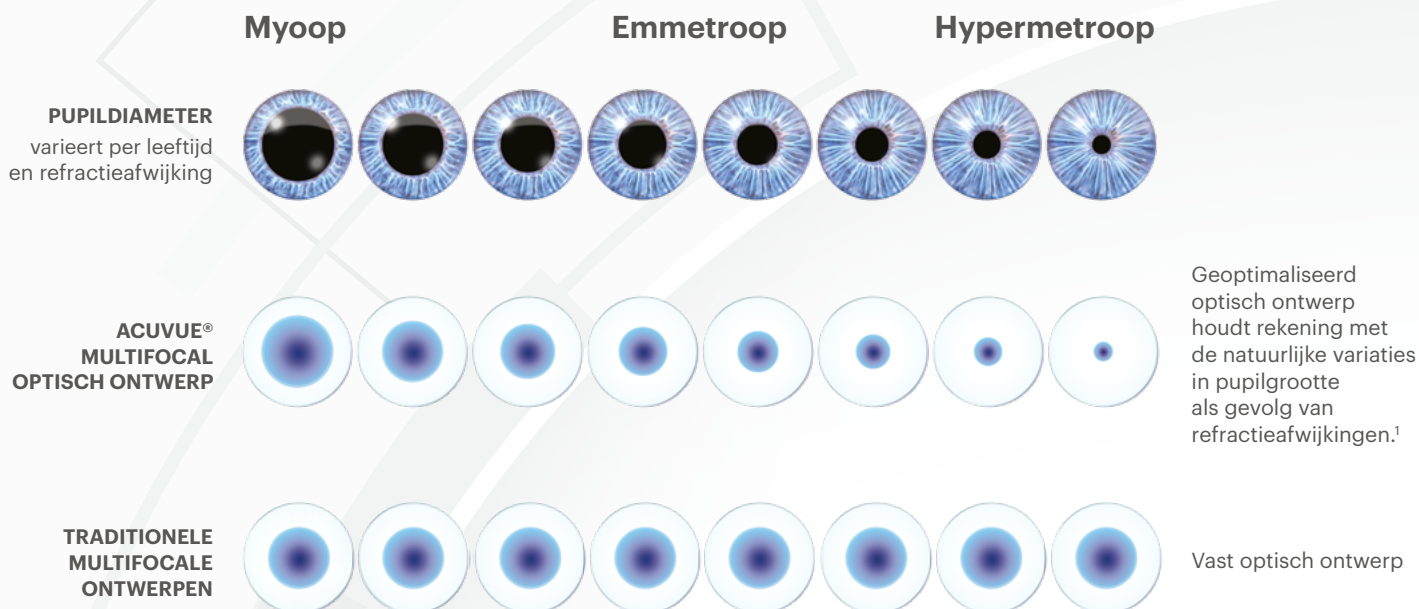

Alleen voor illustratieve doeleinden. De pupil kan 20% variëren in grootte afhankelijk van de hoeveelheid licht.*

INGEBOUWDE PRECISIE

ACUVUE® MULTIFOCAL PORTFOLIO biedt een betere passing:
De Hybrid Back Curve Technology **sluit beter aan op de natuurlijke vorm van het oog**. Dit helpt de optische zone van de lens op de **juiste plaats te houden**.¹



Productafbeeldingen zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden

Hetzelfde ontwerp, parameters en aanpasproces voor alle modaliteiten zodat u in een paar eenvoudige stappen succesvol kunt aanpassen¹

*Sterktebereik: +6.00D t/m -9.00D. **Vergeleken met concurrerende ontwerpen; technologie geoptimaliseerd voor verschillende refractieafwijkingen en leesaddities.

Initiële lensselectie

1

Bepaal de beste sferische refractie

Begin altijd met een nieuwe subjectieve refractie°, bepaal dan de meest positieve sferische sterkte bij de hoogst haalbare visus.°°

2

Bepaal het sensorisch dominante oog

Aanbevolen methode is het gebruik van een nevelglas van +1.00D.

3

Bepaal de minimale additie op basis van de behoeften van de klant.

Bepaal vervolgens de laagste ADD die nodig is om goed zicht nabij te bereiken.

4

Gebruik de tabel om het eerste paar paslenzen te selecteren

ADDITIE	OOG	LENSKEUZE
+0.75D t/m +1.25D	Dominante oog	 LOW
	Niet-dominante oog	 LOW
+1.50D t/m +1.75D	Dominante oog	 MID
	Niet-dominante oog	 MID
+2.00D t/m +2.50D	Dominante oog	 MID
	Niet-dominante oog	 HIGH

Laat de klant tenminste 10 minuten zicht buiten de aanpasruimte ervaren en ga daarna verder met de aanpassing, tenzij de klant niet tevreden is met het zicht of de vereisten voor het autorijden niet gehaald worden.



5

Indien verbetering nodig is, ga dan naar de tabel hieronder. Overrefractie wordt *niet* aanbevolen.

VERBETERING VOOR VERAf	VERBETERING VOOR DICHTBIJ
ACUVUE® SFERISCH	
 LOW	 LOW
 LOW	 LOW +0.25D^
 LOW	 MID
 MID	 MID +0.25D^
 MID	 MID
 MID +0.25D^	 HIGH +0.25D^

^ 0.25D optellen bij de sterkte voor zicht veraf voor het niet-dominante oog.



Meer succesvolle aanpassingen door het volgen van de aanpashandleiding

ACUVUE® MULTIFOCAL PORTFOLIO met PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGIE:



Biedt een meer **gepersonaliseerde oplossing voor uw klant.*****1

Levert **consistent aanpassucces** bij presbyope klanten, **ongeacht hun sterktes en behoeften** om op verschillende afstanden te kunnen zien.¹

LENSSPECIFICATIES	1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL	ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL 2-WEKELIJKS	ACUVUE® OASYS MAX 1-DAY MULTIFOCAL
Materiaal	etafilcon A	senofilcon A	senofilcon A
Diameter	14.3 mm	14.3 mm	14.3 mm
Basiscurve	8.4 mm	8.4 mm	8.4 mm
Bevochtigingsmiddel	Ingewerkte PVP [†] /LACREON® Technologie	Ingewerkte PVP [†] /HYDRACLEAR® PLUS Technologie	TearStable™ Technologie OptiBlue™ Lichtfilter [‡]
UV-Filter [†]	Klasse 2	Klasse 1	Klasse 1
Dk/t [§]	25.5 x 10 ⁻⁹ §	147 x 10 ⁻⁹ §	121 x 10 ⁻⁹ §
Hanteerbaarheid	Lichtblauwe tint	Lichtblauwe tint	Blauw/groene tint [‡]
Sterktebereik	-9.00D t/m +6.00D (per 0.25D)	-9.00D t/m +6.00D (per 0.25D)	-9.00D t/m +6.00D (per 0.25D)
Addities	LOW +0.75D t/m +1.25D MID +1.50D t/m +1.75D HIGH +2.00D t/m +2.50D	LOW +0.75D t/m +1.25D MID +1.50D t/m +1.75D HIGH +2.00D t/m +2.50D	LOW +0.75D t/m +1.25D MID +1.50D t/m +1.75D HIGH +2.00D t/m +2.50D

§ Dk/t eenheden: 10 (cm/sec) (mL O / mL x mm Hg). Alle Dk waardes: Fatt eenheden op 35°C, vastgesteld d.m.v. polarografische methode. (rand & grens gecorrigeerd) (-3.00D lens). +PVP=polyvinylpyrrolidone.



Ga naar de ACUVUE® Multifocal Aanpascalculator om de lenzen snel en eenvoudig aan te meten



Belangrijke veiligheidsinformatie: ACUVUE® contactlenzen zijn geïndiceerd voor zichtcorrectie. Zoals met alle contactlenzen kunnen er oogproblemen, waaronder hoornvliesproblemen, ontstaan. Sommige dragers kunnen lichte irritatie, jeuk of ongemak ervaren. Contactlenzen mogen niet worden gebruikt bij ooginfecties of andere oogaandoeningen, of bij een systemische aandoening die het oog kan aantasten. Voor uitgebreide informatie, inclusief contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen, raadpleegt u de Instructies voor Gebruik of bezoekt u onze Johnson & Johnson website: www.e-ifu.com. Voor aanvullende informatie gaat u naar onze Johnson & Johnson Vision website www.jnjvisioncare.nl

± Het is niet aangetoond dat het filteren van HEV-licht op contactlenzen enig systemisch en/of oculair gezondheidsvoordeel oplevert voor de gebruiker. De contactlensspecialist moet worden geraadpleegd voor meer informatie. † ACUVUE® OASYS MAX 1-Day heeft een uniek blauw/groen uiterlijk als gevolg van de combinatie van het blauw-violet/hoogenergetisch zichtbaar [HEV] lichtfilter en de blauwe zichtbaarheidstint. ‡ Alle ACUVUE® contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt. UV-absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV-blok, aangezien zij het oog en het gebied eromheen niet volledig bedekken. UV overdracht gemeten met -1.00D lens. #Maximaal 4 proeflenzen in totaal. *Vergeleken met het vorige multifocale ontwerp van JJV; technologie geoptimaliseerd voor verschillende refractieafwijkingen en leesaddities ten behoeve van visusverbetering op verschillende afstanden en bij verschillende lichtomstandigheden. **Vergeleken met concurrerende ontwerpen; technologie geoptimaliseerd voor verschillende refractieafwijkingen en leesaddities.

1. JJV Data on File 2022. ACUVUE® PUPIL OPTIMISED DESIGN TECHNOLOGY: JJVC Contact Lenses, Design Features, and Associated Benefits.
2. JJV Data on File 2022. Definitie TearStable™ Technologie.

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL, LACREON®, HYDRACLEAR®, TearStable™ en OptiBlue™ zijn handelsmerken van Johnson & Johnson.
© Johnson & Johnson 2025. VPOA1132NL-Jan25 / 2025PP04634

ACUVUE®
MULTIFOCAL
WITH PUPIL OPTIMISED DESIGN