



IFU000797E
02/2025

Instructions for Use Daily Wear and Extended Wear ACUVUE Contact Lenses

Graphics

TR	Kullanım Talimatları Günlük Kullanım (Sık Değişim) Ve Uzun Süreli ACUVUE Kontakt Lens Kullanımı	3
EN	Instructions for Use Daily Wear and Extended Wear ACUVUE Contact Lenses.	5

Fig. 1



Fig. 2


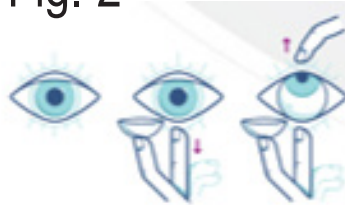


Fig. 3



Fig. 4

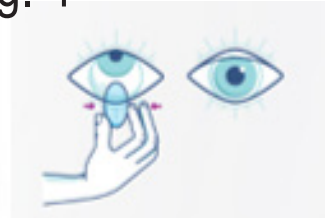

ACUVUE®



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway,
Jacksonville, Florida, 32256, USA



IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care
Ireland UC, The National Technology Park,
Limerick, Ireland



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office
Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

CE
2797

LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. ACUVUE KONTAKT LENSLE (KL) TIBBİ CİHAZLARDIR VE UYGUN KULLANIM HER ZAMAN BİR GÖZ HASTALIKLARI UZMANI (GHU) TARAFINDAN BELİRLENMELİDİR. GHU'NUZUN YÖNLENDİRMELERİNİ VE BU KILAVUZDA SAĞLANAN TALİMATLARI HER ZAMAN TAKİP EDİN.

1.ÜRÜ AÇIKLAMASI VE KULLANIM AMACI: Listelenen tüm ürünler ülkenizde mevcut olmayabilir.

Günlük Kullanım (14 Gün - Sık Değişim) (uyanırken 24 saatten az) veya Uzun Süreli Kullanım (7 gün/6 geceye kadar kesintisiz kullanılabilir ve çıkarıldıktan sonra atılmalıdır) (uyku dahil 24 saatten fazla). Uzun Süreli Kullanım için kullanıldığında, temizlik veya dezenfeksiyon gerekmektedir. GHU niz kullanım programınızı ve değiştirme programınızı belirleyecektir.

Senofilcon A Kontakt Lensler (38% H₂O), metil eter selüloz içeren borat tamponlu tuzlu su içinde:

ACUVUE OASYS Marka HYDRACLEAR PLUS içeren Kontakt Lensler, sağlıklı gözleri olan ve 1.00D veya daha az astigmatizması bulunan kişilerde miyopi (uzağı görememe) ve hipermetropi (yakını görememe) optik olarak düzeltmek için tasarlanmıştır. Lensler ayrıca bazı göz hastalıkları için bandaj lensi olarak ve kornea rahatsızlıklarını hafifletmek amacıyla terapötik kullanım için de belirtilmiştir. GHU niz böyle bir durumunuz olup olmadığını söyleyecektir ve bireysel durumunuz için ek ilaçlar veya değiştirme programları reçete edebilir. Bandaj lensi olarak kullanım GHU niz tarafından yakından izlenmelidir. Yönlendirilmeden, yalnızca GHU kontakt lensi takabilir ve çıkarabilir. Herhangi bir durumu kontakt lens veya göz ilaçları ile kendi başınıza tedavi etmeyin, önce GHU nizle danışın.

ASTİGMATİZMA için ACUVUE OASYS Marka HYDRACLEAR PLUS içeren Kontakt Lensler, sağlıklı gözleri olan ve astigmatizması bulunan kişilerde miyopi (uzağı görememe) ve hipermetropi (yakını görememe) optik olarak düzeltmek için tasarlanmıştır.

ACUVUE OASYS MULTİFOKAL, sağlıklı gözleri olan ve presbiyopik olan bireylerde görmenin düzeltilmesi için belirtilmiştir ve ayrıca miyopi (uzağı görememe) veya hipermetropi (yakını görememe) düzeltilmesine ihtiyaç duyabilirler ve 0.75D veya daha az astigmatizmaya sahip olabilirler.

Senofilcon C Kontakt Lensler (%41 H₂O) metil eter selüloz içeren borat tamponlu tuzlu su içinde: Günlük Kullanım için tasarlanmıştır (1 ay - Sık Değişim).

ACUVUE VİTA Marka Kontakt Lensler, sağlıklı gözleri olan ve 1.00D veya altında astigmatizması bulunan kişilerde miyopi (uzağı görememe) ve hipermetropi (yakını görememe) optik olarak düzeltmek için tasarlanmıştır.

ASTİGMATİZMA için ACUVUE VİTA Marka Kontakt Lensler, sağlıklı gözleri olan ve astigmatizması bulunan kişilerde miyopi (uzağı görememe) ve hipermetropi (yakını görememe) optik olarak düzeltmek için tasarlanmıştır. Boratlar (borik asit ve sodyum borat), %0.1 üzerindeki konsantrasyonda CMR 1B maddeleri olarak tanımlanırlar ve ürün etiketindeki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında güvenlidir.

UYARI: UV blokajlı KL, UV korumasının yerine geçmez. Önerilen şekilde UV blokajlı gözlükleri kullanmaya devam etmeniz gerekir.

KONTRENDİKASYONLAR:

Görme düzeltilmesi için KL kullanırken, göz hastalığı, yaralanma, iltihaplanma, enfeksiyon veya anormallik durumunda KL KULLANMAYIN.

- KL kullanımının veya KL solüsyonlarının kullanımının neden olduğu veya ağırlaştırdığı göz veya çevre dokulardaki herhangi bir durum veya hastalık
- Gözlerin kızarması veya tahriş olması. Bazı kişiler kontakt lens bakım solüsyonlarındaki kimyasallara veya koruyuculara karşı alerjik bir tepki geliştirebilir.

UYARILAR:

Bu uyarılara uyulmaması ciddi enfeksiyon, görme kaybı veya körlüğe yol açabilir. ÇEŞİTLİ GÖZ SORUNLARI (KORNEA ÜLSERLERİ DAHİL) HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİŞEBİLİR VE GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR. AŞAĞIDAKİ SEMPTOMLARDAN (Gözde Rahatsızlık, Görme Kaybı, Görmeye Değişiklikler, Aşırı Sulanma, Gözde Kızarıklık) HERHANGİ BİRİNİ YAŞARSANIZ, DERHAL KL'NİZİ ÇIKARMALI VE GHU'NUZ İLE İLETİŞİME GEÇMELİSİNİZ.

- Herhangi bir göz hastalığı varsa KL takmayın
- Uyurken kontakt lenslerinizi takmayın, yalnızca GHU niz size Uzun Süreli Takma (7 gün/6 gece) için kontakt lens yazdıysa takabilirsiniz.
- KL'Yİ SUYA MARUZ BIRAKMAYIN, BU CİDDİ ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR. Suya maruz kalan KL'yi atın ve değiştirin (Su sporu sırasında KL takmayın).
- Lenslerinizi ASLA musluk suyuyla yıkamayın.

ÖNLEMLER:

STERİL BLİSTER AMBALAJ AÇILMIŞ, HASAR GÖRMÜŞ YA DA SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞSE LENSİ KULLANMAYIN.

- Sadece size reçete edilmiş KL'nizi takın. GHU'nuza danışmadan lensinizin çeşidini veya parametrelerini değiştirmeyin. Takip ziyareti programı hakkında GHU'nuzdan bilgi alın.
- GÖZÜNÜZDE HERHANGİ BİR İLAÇ KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA GHU İLE İLETİŞİME GEÇİN.
- Lenslerinizi lens kabından çıkarmak için ASLA cımbız veya başka bir alet kullanmayın.
- Sigara içmek ve/veya bazı ilaçları (doğum kontrol hapları veya diğer ilaçlar gibi) almak göz sorunlarını veya göz rahatsızlığını artırabilir.
- Zararlı veya tahriş edici buhar/dumana maruz kalmaktan kaçının. Aerosol ürünlerin kullanımı sırasında gözlerinizi kapalı tutun.

ADVERS OLAYLAR:

Yanma, batma, kaşınma ve/veya gözlerde kuruluk

- Lensin konforunda azalma veya gözünüzde bir şey varmış hissi - Gözlerin içinde veya etrafında şişme veya enflamasyon - Gözde kızarıklık
- Göz kapağı sorunları - Gözlerde sulanma ve/veya olağan dışı göz salgıları - Görüş keskinliğinde bozulma veya bulanık görme - Nesnelerin etrafında ışık halkası (halolar) veya gökkuşağı benzeri görüntüler görme - Işığa duyarlılık - periferik infiltratlar, periferik kornea ülserleri ve korneal erozyon nedeniyle bazı geçici bozukluklar. Herhangi bir sorun fark ederseniz, HEMEN KL'nizi ÇIKARMALI ve GHU'nuz ile iletişime geçmelisiniz.

KULLANIM TALİMATLARI:

Kullanım talimatlarına uyulmaması ciddi göz sorunlarına yol açabilir.

- KL kirlenmeye karşı çok hassas olduğu için KL'NİZE DOKUNMADAN ÖNCE DAIMA ELLERİNİZİ YIKAYIN.
- LENSLEİNİZİ ASLA AĞZINIZA KOYMAYIN VEYA LENSLEİNİZİN ÜZERİNE TÜKÜRÜK SÜRMİYİN.
- ASLA LENSLEİNİZİ BAŞKASININ TAKMASINA İZİN VERMEYİN.
- KL'nizin takılması ve çıkarılmasıyla ilgili GHU'nuzun talimatlarına uyun.

Lens Ambalajı: Lensi çıkarmak için folyo kılıfı dikkatli bir şekilde geriye doğru soyun.

Lens Takma: Lensin ters yüz olmadığından emin olun. Şeklini kontrol etmek için işaret parmağınızın üzerine yerleştirin. Lensin doğal, eğimli ve çanak şeklinde olması gerekir (Şekil 1). Lens işaret parmağınızdayken göz kırpmamanız için diğer elinizle üst göz kapağınızı tutun. Lensi gözünüze yerleştirin. (Şekil 2 ve 3).

Lens Çıkarma: Yukarı bakın, işaret parmağınızı kullanarak lensi gözün alt kısmına kaydırın. Çıkarmak için lensi baş ve işaret parmaklarınızın arasında hafifçe çimdikleyin. (Şekil 4)

ACİL DURUMLAR: Gözünüze herhangi tür bir kimyasal (ev tipi ürünler, bahçe işi solüsyonları, laboratuvar kimyasalları vb.) sıçarsa:

GÖZLERİNİZİ HEMEN MUSLUK SUYUYLA YIKAYIN VE DERHAL GHU'NUZLA İLETİŞİME GEÇİN VEYA BİR HASTANE ACİL SERVİSİNE GİDİN.

ADVERS OLAYLARIN BİLDİRİLMESİ (Yan Etkiler): ACUVUE Marka KL kullanırken karşılaştığınız tüm olaylar, üreticiye ve/veya yetkili temsilcisine ve/veya bulunduğunuz ülkedeki ulusal yetkili makama bildirilmelidir.

Göz Hastalıkları Uzmanlarıyla ilgili ek bilgileri www.e-ifu.com adresinde bulabilirsiniz. Düzenleme Tarihi: 02/2025

Tüketici Haklarına İlişkin Bilgilendirme:

Satın almış olduğunuz kontakt lenslerin ayıplı olması halinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesi çerçevesinde tarafınıza tanınmış olan seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu kapsamda birini kullanabileceğiniz seçimlik haklarınız şu şekildedir:

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, (c) ve (ç) maddelerinde belirtilen hakları, üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilirsiniz.

Seçimlik haklarınıza ilişkin diğer detaylar için lütfen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11.Maddesi'ne bakınız. Şikayet ve itirazlarınızı konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem heyetine yapabilirsiniz.

Aşağıdaki semboller etiket veya ambalajlarda bulunabilir:

Sembol	Açıklama
	Üretim Tarihi
	Üretici
	Kullanım Süresi (son kullanma tarihi)
	Parti Kodu
	Ambalaj Hasarlı ise Kullanmayın
	Kullanım kılavuzuna bakın
	Dikkat
	Buhar Isısı Kullanılarak Sterilize Edilmiştir
	Avrupa Birliği içinde kullanılan Tıbbi Cihaz
	Tek Bir Steril Bariyer Sistemini Gösterir
	DİKKAT: ABD Federal Yasaları bu cihazın satışını yetkili bir doktor tarafından veya yetkili bir doktorun izniyle yapılacak şekilde sınırlamıştır
	UV Blokajı
	Avrupa Birliği içinde Yetkili Temsilci
	CE İşareti ve Onaylı Kuruluşun Tanımlama Numarası
	Çap
	Temel Eğri
	Diyoptri (lens gücü)
	Silindirik Güç
	Aks
	Düzeltililebilecek En Yüksek Yakın Ekleme
	"Düşük" yakın ADD
	"Orta" yakın ADD
	"Yüksek" yakın ADD
	Tehlikeli Maddeler İçerir
	İthalatçı

EN Instructions for Use Daily Wear and Extended Wear ACUVUE Contact Lenses.

PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. ACUVUE CONTACT LENSES (CL) ARE MEDICAL DEVICES AND SHOULD BE FITTED BY AN EYE CARE PROFESSIONAL (ECP). ALWAYS FOLLOW YOUR ECP'S DIRECTIONS AND THE INSTRUCTIONS IN THIS LEAFLET.

PRODUCT DESCRIPTION and INTENDED USE:

Senofilcon A Contact lenses (38% H₂O) in borate buffered saline with methyl ether cellulose: Intended for Daily Wear (14 Days - Frequent replacement) (less than 24 hours, while awake) or Extended Wear (may be used continuously for up to 7 days/6 nights and discarded upon removal) (greater than 24 hours, including while asleep). When used for Extended Wear, no cleaning or disinfection is required. Your ECP will determine your wearing schedule and your replacement schedule.

ACUVUE OASYS Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR PLUS are intended for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes who may have 1.00D or less of astigmatism. Lenses are also indicated for therapeutic use as a bandage lens for certain ocular conditions and to relieve corneal discomfort. Your ECP will tell you if you have such a condition and may prescribe additional medications or replacement schedules for your individual condition. Use as a bandage lens should be closely monitored by your ECP. When directed, only the ECP will apply and remove the CL. Do not self-treat any condition with a CL or eye medications without first consulting your ECP.

ACUVUE OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM are intended for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes who have astigmatism.

ACUVUE OASYS MULTIFOCAL Contact Lenses are indicated for the correction of vision in presbyopic people with healthy eyes who are presbyopic and may also need correction of myopia (short-sightedness) or hyperopia (long-sightedness) and may have 0.75D or less of astigmatism.

Senofilcon C Contact lenses (41% H₂O) in borate buffered saline with methyl ether cellulose: Intended for Daily Wear (1 month - Frequent Replacement)

ACUVUE VITA Brand Contact Lenses are intended for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes who may have 1.00D or less of astigmatism.

ACUVUE VITA Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM are intended for the optical correction of myopia (short-sightedness) and hyperopia (long-sightedness) in persons with healthy eyes who may have astigmatism.

Borates (boric acid & sodium borate) are defined as CMR 1B substances in a concentration above 0.1% weight by weight and are safe when the product is used according to label instructions.

WARNING: UV absorbing CL are not substitutes for UV protection. You should continue to use UV absorbing eyewear as directed.

CONTRAINDICATIONS: When wearing CL for vision correction, DO NOT USE CL in case of eye disease, injury, inflammation, infection, or abnormality.

- Any condition or disease of the eye or surrounding tissues induced or aggravated by wearing CL or use of CL solutions.
- If eyes become red or irritated. Some people may develop an allergic response to chemicals or preservatives in contact lens care solutions.

WARNINGS: Failure to adhere to these warnings can lead to severe infection, vision loss or blindness. EYE PROBLEMS (INCLUDING CORNEAL ULCERS) CAN DEVELOP RAPIDLY AND LEAD TO LOSS OF VISION. IF YOU EXPERIENCE ANY OF THE FOLLOWING SYMPTOMS (Eye Discomfort, Loss of Vision, Vision Changes, Excessive Tearing, Eye Redness), you should IMMEDIATELY REMOVE YOUR CL AND PROMPTLY CONTACT YOUR ECP.

- Do not wear CL if there is any eye disease.
- Do not wear your CL when sleeping except if your ECP prescribed you CL for Extended Wear (7 days/6 nights)
- DO NOT EXPOSE CL TO WATER, THAT MAY LEAD TO SERIOUS INFECTION. Discard and replace any CL exposed to water (Do not wear CL during water sport.)
- NEVER use WATER, SALINE SOLUTION, OR REWETTING DROPS TO CLEAN OR DISINFECT CL.

PRECAUTIONS: DO NOT USE YOUR LENSES IF THE STERILE BLISTER PACKAGE IS OPENED, DAMAGED OR AFTER THE EXPIRY DATE.

- Only wear your own prescribed CL. Do not change your lens type or parameters without consulting your ECP. Ask your ECP about the follow-up visit schedule.
- ALWAYS CONTACT ECP BEFORE USING ANY MEDICINE IN YOUR EYES.
- NEVER use tweezers or other tools to remove your lenses from the lens container.
- Smoking and/or taking some medicines (like contraceptives or other medicines) may increase eye problems or eye discomfort.
- AVOID all harmful or irritating vapors/fumes. Keep your eyes closed during usage of aerosol products.

ADVERSE REACTIONS: Burning, stinging, itchy, and/or dry eyes - Reduced lens comfort or feeling of something in your eye - Swelling or inflammation in or around the eyes - Eye redness - Eyelid problems - Watery eyes and/or unusual eye secretions - Poor or blurred vision - Rainbows or halos around objects - Sensitivity to light - temporary impairment due to peripheral infiltrates, peripheral corneal ulcers, and corneal erosion. If you notice any problems, you should IMMEDIATELY REMOVE YOUR CL and contact your ECP.

DIRECTIONS FOR USE: Not following directions for use may result in severe eye problems.

- ALWAYS WASH YOUR HANDS BEFORE TOUCHING YOUR CL as the CL and CL case are very sensitive to contamination.
- NEVER PUT YOUR LENSES IN YOUR MOUTH OR PUT SALIVA ON YOUR LENSES.
- NEVER ALLOW ANYONE ELSE TO WEAR YOUR LENSES.
- Follow your ECP instructions for wear, removal, storage, and case maintenance.

Lens Package: Carefully peel back the foil closure to reveal the lens.

Lens Insertion: Ensure the lens is not inside out. Place on your index finger to verify the shape. The lens should assume a natural, curved, bowl-like shape (Fig. 1). With the lens on your index finger, use your other hand to hold your upper eyelid so you will not blink. Place the lens onto the eye. (Fig 2 &3).

Lens Removal: Look up, slide the lens to the lower part of the eye using the forefinger. Gently pinch the lens between the thumb and forefinger to remove the lens.

(Fig. 4)

Caring for CL: USE ONLY RECOMMENDED SOLUTIONS TO CLEAN, DISINFECT AND STORE YOUR CL and follow the instructions provided. DO NOT heat the disinfection solution and CL. Always keep CL completely covered by disinfecting solution when stored in a closed case. If CL becomes dried out, discard it and replace it. Always empty/clean & rinse CL case using fresh, sterile disinfecting solutions/CL cleaner and wiping the lens case with a fresh, clean tissue. Replace CL case according to instructions to prevent microbial growth. For hydrogen peroxide lens care systems, use ONLY the lens case provided. Failure to neutralize hydrogen peroxide will result in severe stinging, burning and injury to the eye. EMERGENCIES: If chemicals of any kind (household products, gardening solutions, laboratory chemicals, etc.) are splashed into your eyes: FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH TAP WATER AND IMMEDIATELY CONTACT YOUR ECP OR VISIT A HOSPITAL EMERGENCY ROOM RIGHT AWAY.

REPORTING OF ADVERSE REACTIONS (Side Effects): Any incident experienced whilst wearing ACUVUE Brand CL should be reported to the manufacturer and/or its authorized representative and/or to your national authority.

The following symbols may appear on the labels or packaging:

Symbol	Definition
	Caution, Consult instructions for use
	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Use-by Date (expiration date)
	Batch Code
	Sterilized Using Steam Heat
	Do Not Use if Package is Damaged
	Fee Paid for Waste Management
	CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner
	Medical Device in the European Community
	Indicates a Single Sterile Barrier System
	UV Blocking
	Authorized Representative in the European Community
	CE-mark and Identification Number of Notified Body
	Diameter
	Base Curve
	Dioptre (lens power)
	Cylinder Power
	Axis
	Highest Near Addition That Can Be Corrected
	"Low" near ADD
	"Medium" near ADD
	"High" near ADD
	Lens Orientation Correct
	Lens Orientation incorrect (Lens Inside Out)
	"Identification mark" for paper containers and wrapping
	"Identification mark" for composite materials
	Contains Hazardous Substances
	Importer in European Community